


KEELER GRIFF GRÖÖE C

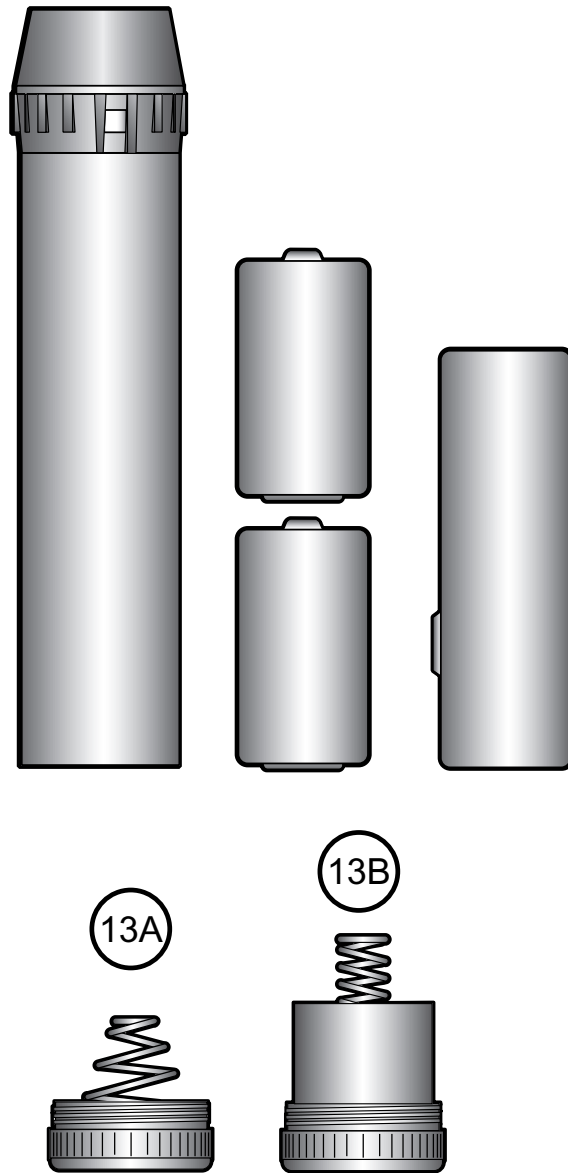

LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN.

Keeler Griff Größe C

Lesen Sie sich diesen Anleitungsabschnitt aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Keeler Produkt verwenden.

Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Kunden alle Sicherheitsangaben in diesem Abschnitt. Die folgenden Angaben dienen zur Verdeutlichung möglicher Gefahren, die mit Missbrauch oder Beschädigung des Produkts verbunden sind.



Warnung

Dieses Produkt nicht in Gegenwart entzündlicher Gase verwenden.

Die Batterie nicht auseinandernehmen oder umbauen. Sie enthält keine zu wartenden Teile.

Die Batterie nicht verbrennen. Nicht durchstechen.

Keine verformte, auslaufende, zerätzte oder sichtbar beschädigte Batterie verwenden.

Sollte das Produkt einen seltsamen Geruch, Wärme oder Rauch abgeben, stellen Sie den Gebrauch sofort ein. Wird ein beschädigtes Produkt oder ein Teil weiterhin verwendet, kann es dadurch zu Verletzungen kommen.

Die Einheit nicht in Flüssigkeiten tauchen.

Das Produkt bei Beschädigung nicht verwenden. Regelmäßige Sichtprüfung auf Anzeichen auf Beschädigung durchführen.

Es können nur Keeler Griffe mit einer roten Kappe, im Keeler Ladegerät verwendet werden. Versuchen Sie nicht, einen Keeler Griff mit einer blauen Kappe in die Keeler Ladegeräte einzusetzen. Siehe dazu die Kennzeichnung der Keeler Griffe und Birnen.

Achtung

Entfernen Sie Trockenbatterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

Verwenden Sie nur Keeler wiederaufladbare Batterien mit der Teilenummer. 1919-P-7069

Laden mit Keeler Ladegeräten

Keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen verwenden.

Die Batterie nicht in einer Umgebung aufladen, in der die Temperatur 40°C übersteigen oder unter 0°C fallen kann.

Von Kindern fernhalten.

Nicht in eine beschädigte Steckdose einstecken.

Ausschließlich für den Innengebrauch (vor Feuchtigkeit schützen).

Zur Vermeidung von Kondensationsbildung sollte das Instrument vor der Verwendung Raumtemperatur erreichen.

Prüfen Sie bei Verbinden der Instrumentenköpfe mit den Griffen, dass die Spannung der Birne im Instrument der Spannung des Griffs entspricht. Stellen Sie sicher, dass der Regler auf AUS steht, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist.

Drehen Sie zum Ersetzen der Lithiumzelle den Griff ab und legen Sie die neue Zelle ein. Setzen Sie die Grundkappe wieder auf und stellen Sie den Griff in den Ladeschacht.

Umweltaspekte

Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Wiederverwertung von Batterien.


Kleben Sie die Batteriekontakte ab, um während des Entsorgens einen Kurzschluss zu vermeiden.

Wiederaufladbare Batterien enthalten keine giftigen Schwermetalle, wie beispielsweise Quecksilber, Kadmium oder Blei.

Environnement


Ne pas jeter les batteries n'importe où. Suivre la réglementation locale pour le recyclage des batteries.

Couvrir les points de contacts de la batterie pour éviter les courts-circuits au moment de la jeter.

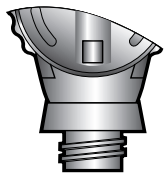


Anschluss der Instrumentenköpfe an den Griff.


Das Verbindungsstück zwischen dem Instrumentenkopf und dem Griff besteht aus einem Schraubgewinde. Um den Instrumentenkopf anzuschließen, verbinden Sie ihn wie angegeben und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen dem Kopf und dem Griff fest ist.

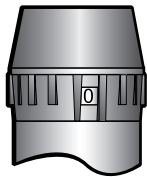

AUS

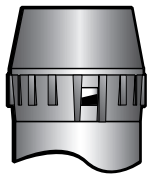

HALB EIN

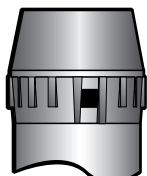

GANZ EIN

Eignung

Die Keeler Fachmann-, professionellen, Standard- und Arzt-Ophthalmoskope und die Keeler Skiaskope sind für den Einsatz mit Keeler Vista 2.8V und 3.6V Keeler Griffen geeignet.

Ein/Aus-Helligkeitsregler

Um das Instrument einzuschalten, drehen Sie den Helligkeitsregler wie angezeigt nach rechts. Um das Instrument auszuschalten, drehen Sie den Helligkeitsregler wie angezeigt nach links. Keeler Griffe der Größe C haben einen Stromanzeiger. Damit wird angezeigt, ob das Instrument ein- oder ausgeschaltet ist.

Rot = ein

Silber = aus.

Griffidentifizierung

Die Keeler Griffe der Größe C haben einen Farbschlüssel, um Ihnen die Unterscheidung zwischen einem Trockenbatterie-Griff (2.8V) und einem Griff für wiederaufladbare Batterien (3.6V) zu ermöglichen. Die Griffe haben folgenden Farbschlüssel:

Blaue Kappe = 2.8V für Trockenbatterien.

Rote Kappe = 3.6V für wiederaufladbare Batterien.

13A

13B

Keeler Birnen sind nach demselben Farbschlüssel gekennzeichnet.

Blaue Kappe = 2.8V für Trockenbatterien.

Rote Kappe = 3.6V für wiederaufladbare Batterien.



Stellen Sie bitte beim Wechseln der Batterien und Birnen sicher, dass die Spannung der des Griffes entspricht. Altbatterien umweltgerecht gemäß der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Batterien einlegen/wechseln

Kappe des Batteriefachs losschrauben, Batterien einlegen und Kappe des Batteriefachs wie angezeigt wieder einsetzen. Es sollten folgende Trockenbatterien verwendet werden:

Keeler Griff Größe C - 2 x 1.5V Größe C Batterien. - Duracell MN 1400 oder gleichwertig.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Keeler Griffe für wiederaufladbare Batterien für gewöhnlich mit einer wiederaufladbaren Batterie geliefert werden.

(3.6V- 0.7Ah Ni-Cd)

Aufrüstung von Batteriegriffen auf wiederaufladbare Griffe.

Ihr Keeler 2.8V Griff der Größe C (blaue Kappe) für Trockenbatterien kann auf einen 3.6V (rote Kappe) Griff für wiederaufladbare Batterien aufgerüstet werden. Siehe Abschnitt Zubehör für die entsprechenden Teilenummern.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Birne in Ihrem Instrument dann auch entsprechend von 2.8V auf 3.6V aufgerüstet werden muss. Einzelheiten erfahren Sie beim Keeler Service unter +44 (0)1753 857177.

Ladeanleitungen Für Wiederaufladbare Keeler Griffe Größe C.



Achtung

Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

Batterieconditionierung

Ihre wiederaufladbaren Keeler Batterien müssen konditioniert werden, um zu gewährleisten, dass Sie die maximale Lebensdauer des Produkts erhalten. Folgen Sie den angegebenen Anleitungen zur Konditionierung.

Schritt 1

Laden Sie Ihre neue wiederaufladbare Keeler Batterie voll auf. Das dauert etwa 15 Stunden.

Schritt 2

Benutzen Sie das Instrument, OHNE ES WIEDERAUFZULADEN, BIS DIE BATTERIE VOLLKOMMEN LEER IST.

Schritt 3

Sobald die Batterie leer ist, laden Sie sie wieder voll auf. Das dauert etwa 15 Stunden. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3 dreimal, d. h. laden und entladen Sie die Batterie dreimal vollständig, um den Konditionierungsvorgang abzuschließen.

Sobald Sie Ihre Batterien wie oben beschrieben konditioniert haben, können Sie das Instrument ins Ladegerät stellen, wenn es zwischen Untersuchungen nicht verwendet wird.

Geeignete Ladegeräte

Wiederaufladbare Keeler Griffe können mit folgenden Keeler Ladegeräten verwendet werden:

Produktreihe Vista Ladegeräte (einfach, doppelt, mobil)

Keeler Mini-Ladegerät

Keeler Duo-Ladegerät.

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie eines der aufgeführten Netzteile verwenden.

Ladegeräte anderer Firmen (nicht von Keeler)



Achtung

Laden Sie den Keeler Griff nur mit einem Ladegerät, das eine 65 mA Strombegrenzung bietet.



Wiederaufladbare Keeler Griffe Größe C können mit den meisten üblichen Ladegeräten verwendet werden. Soll das Instrument mit einem Ladegerät aufgeladen werden, dass nicht von Keeler geliefert wird, stellen Sie zuerst einmal sicher, dass die Stromaufnahme vom Ladegerät einer anderen Firma eine 65 mA Strombegrenzung bietet. Entfernen Sie dann die Mitte der Grundkappe mit einer Münze. Sie können Ihren Keeler Griff jetzt mit dem Ladegerät eines anderen Herstellers laden.

Reinigungsanleitungen

Das Instrument sollte nur per Hand, und ohne es in Flüssigkeiten einzutauchen, wie im Folgenden beschrieben gereinigt werden:

1. Die Außenfläche mit einem sauberen, saugfähigen und fusselfreiem Tuch, das mit Wasser/Reinigungslösung (2% Reinigungsmittel des Gesamtvolumens) oder Wasser/Isopropyl-Alkohollösung (70% Isopropyl-Alkohol des Gesamtvolumens) angefeuchtet wurde, abwischen.
2. Darauf achten, dass überfließende Lösung nicht ins Instrument gelangt. Vorsichtig vorgehen, um sicherzustellen, dass das Tuch keine Lösung aufsaugt.
3. Oberflächen sollten vorsichtig per Hand mit einem sauberen, fusselfreien, trockenen Tuch getrocknet werden.
4. Gebrauchte Reinigungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.

Garantie und Wartung

Es sind keine vom Benutzer zu wartende Teile vorhanden. Jegliche vorbeugende Wartung und Instandhaltung ist ausschließlich von dazu befugten Keeler Vertretern auszuführen.

Ihr Keeler Griff hat eine Garantie für 3 Jahre, und wird in folgenden Fällen ersetzt bzw. gebührenfrei repariert:

1. Fehler aufgrund mangelhafter Herstellung.
2. Ein Nachweis über den Kauf liegt einer jeden Reklamation bei.

HERGESTELLT IN GROSSBRITANNIEN VON:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tel.: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

Gebührenfreie Nummer: 0800 521 251

VERTRIEB:

Keeler Instruments Inc.

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Gebührenfrei: 1 800 523 5620

Tel.: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

„Das CE-Zeichen auf diesem ☐
Produkt zeigt, dass es lt. ☐
Bestimmungen der ☐
Medizingeräte-Richtlinie ☐
93/42/EWG geprüft wurde ☐
und hiermit konform geht.“



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Lieferant